



# GRD08

NUEVO ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL  
CON MICROCONTROLADOR

*Alta tecnología al servicio de su salud*

ESTERILIZACIÓN EN

CALOR SECO

CON MAS CAPACIDAD



Promosa  
dental

Ingeniería Médica



(81) 8478-8978 y 79



info@promosadental.com



8112490632



[www.promosadental.com](http://www.promosadental.com)

# ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

GRUPO LORMA, pone a su alcance lo último en equipo de esterilización por calor seco CON MAYOR CAPACIDAD PARA ESTERILIZAR SU INSTRUMENTAL; el nuevo modelo GRD-07. Permite una esterilización completa y fácil. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM). **Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo resultados exitosos y satisfactorios** en el laboratorio de Asesoría y Verificación ESTERIBACT, afiliado a: Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP), Infection Control Educational Foundation (ICEF), y de Association for Professionals In Infection Control and Epidemiology (APIC).



Sus 2 resistencias blindadas tiene un consumo de 550 watts, 120 volts, 60 Hz; que es controlada por el sistema de operación, obteniendo un ahorro de energía hasta un 60%, comparado con los equipos de termostato.

Capacidad para 60 forceps en sus tres charolas.

El esterilizador Electrónico Digital LORMA es único en su género, debido a que está fabricado y diseñado en función de la electrónica. Operado por un MICROCONTROLADOR. Dando como resultado el control absoluto en el sistema de operación, el cual, tiene como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.



SELLO DE SILICON GRADO HIGIENICO DE ALTA TEMPERATURA, CON SISTEMA DE AUTO-SELLADO A LA PUERTA.

El sistema de operación cuenta con las funciones de: precalentamiento y ciclo de esterilización automático, programa de temperatura con rango de 100-180 grados centígrados, programa de tiempo con un rango de 10 - 99 minutos, control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD), además cuenta con **MEMORIA DE PROGRAMA**, en la que usted puede almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia, y, finalmente con un **programa de detección de error** en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.




## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

(Largo X Ancho X Alto)

COLOR DEL GABINETE

Cámara Interna: 45.5 X 23 X 27 cm  
Gabinete: 60 X 30 X 40 cm  
Charola: 44.5 X 18.5 cm

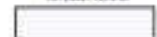

El recubrimiento del cuerpo es con pintura de tipo electrostática en polvo horneada.

La línea del ESTERILIZADOR LORMA, es lisa e impecable, que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

Fabricado y diseñado con la más alta tecnología, para el servicio de Usted.



Ahora con pantalla de CRISTAL LIQUIDO o LCD, para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: temperatura, tiempo, estado de trabajo del equipo y programación, todo al mismo tiempo a través de su LCD. Aunado a lo anterior y en conjunto con los leds indicadores de trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para la esterilización de su material.

Fabricado y Diseñado Por:



Promosa dental

(81) 8478-8978 y 79

info@promosadental.com

8112490632

2 AÑOS DE GARANTIA



[www.promosadental.com](http://www.promosadental.com)