


RAYOS X TROPHY TIMER DIGITAL CETX MOVIL TUBULAR

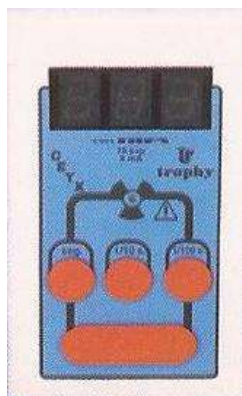

Generador 708 (70 Kv. 8 mA) que incluye:

- Un temporizador y tubo radiogénico sumergidos en aceite
- Un filtro de aluminio que mejora la calidad del haz y reduce la dosis recibida por el paciente.
- Un cilindro localizador que limita la radiación a un diámetro de aproximadamente 6 cm a nivel de la piel y permite una distancia de 20 cm entre el foco de Rayos x y la piel.
- Una escala de angulación y una empuñadura que facilitan el posicionamiento.

Temporizador CETX con disparador con las siguientes características:

- Función de precalentamiento de filamento para aumentar la vida del equipo.
- Disparador tipo DEAD MAN.
- Señalizador visual y acústico de emisión de Rayos X.