



**LORMA**



**LÂMPARA INALÂMBRICA DE FOTOCURADO LORMA**

*LF08*

## LA FORMIDABLE HERRAMIENTA DE FOTOCURADO Y BLANQUEAMIENTO

La lámpara LF08 es un producto diseñado con la nueva generación de luz por led, con una longitud de onda de 455 nm. Tiempo de trabajo en múltiplos de 5 segundos, con tiempo mínimo de 5 s. y máximo de 25 s.

### FIBRA OPTICA NEGRA

Su eficiencia se debe a su uso como conductor de luz.

### CUERPO

Diseño moderno fabricado en aluminio.

¡Mayor resistencia para el trabajo rudo!

Disponible en 2 colores:



PLATA



NEGRO



### PANEL DE CONTROL

Incluye display led en el que se observa: **programa de operación a trabajar, tiempo programado y de operación en uso.**

### 3 PROGRAMAS DE OPERACIÓN

- 1) Intensidad de potencia fija
- 2) Potencia de menor a mayor;
- 3) Intensidad de potencia Intermitente.

### BASE CARGADOR

Ofrece gran movilidad, permitiendo trabajar 10 ciclos continuos en procesos largos de restauraciones.



### Acabado impecable

La línea de Lámparas de Fotocurado LORMA es lisa, proporcionando a la vista un aspecto moderno.


**2** Años de Garantía

Nuestros usuarios son nuestra prioridad, contamos con el servicio técnico más eficiente del mercado.



## 10,000 hrs. de trabajo

Una productividad de la lámpara óptima, gracias al uso de un led de larga vida.

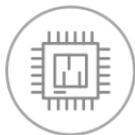

## Sistema operado por un microcontrolador

Control absoluto en el sistema de operación sin ningún error.

### ACCESORIOS:



Fibra Óptica



Difusor de luz



Protector Ámbar



Cargador



Eliminador



Batería de litio

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:

Entrada: 120V~ / 60 Hz.

Salida: 5 VDC~1.5 A

Batería de litio

3.7 V, 2400 mAh

Potencia Lumínica:

1900 mW/cm<sup>2</sup> ±6%

*Con la batería totalmente cargada; la intensidad puede verse disminuida si ésta es baja.*

Longitud de onda:

455 nm

Potencia del led: 5w

Fibra óptica: 8 mm

Peso de la lámpara:

400 gr

Programas

de operación: 3



**ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD**

Fabricado y Diseñado por LORMA®

Tel / Fax: (01 222) 594 3302, 594 3303 | [informes@grupolorma.com.mx](mailto:informes@grupolorma.com.mx)  
[servicios@grupolorma.com.mx](mailto:servicios@grupolorma.com.mx) | [ventas@grupolorma.com.mx](mailto:ventas@grupolorma.com.mx)